



Zgłębnik gastrostomijny danumed® GastroTube




**Nowy zoptymalizowany
projekt produktu**

Zgłębnik gastrostomijny z balonem retencyjnym do długotrwałego żywienia dojelitowego

Zapewnia najwyższy komfort dla pacjenta i jeszcze większą łatwość użytkowania:

- Nowość!** Innowacyjne złącze obrotowe ENSwivel® do łatwego łączenia i rozłączania połączeń ENFit® bez skręcania zgłębnika.
- Nowość!** 90° danuPlate – miękka zewnętrzna płytką z kątem 90° dla bezpiecznego i dyskretnego mocowania.
- Nowość!** danuClip – zacisk do rurki, zapobiega cofaniu się treści pokarmowej/żółtkowej*. (*Dostępny jako osobny produkt, sprawdź kod produktu na ostatniej stronie.)

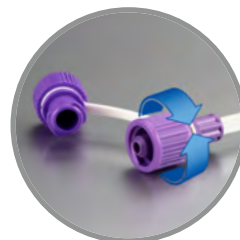

ENSwivel



90° danuPlate



danuClip*

KOMFORT


- Zapewnia najwyższy komfort dla pacjenta dzięki miękkiemu, elastycznemu silikonowi
- Złącze obrotowe ENSwivel® we wszystkich zakończeniach ENFit®
- 90° danuPlate – strukturalna konstrukcja zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza w obszarze stomii
- danuClip – praktyczny, prosty i szybki w użyciu*
- Szeroki wybór rozmiarów od CH 12 do CH 24 dla indywidualnego i idealnego dopasowania
- Zawór do napełniania balonu ze złączem Luer, z kodowaniem kolorystycznym zgodnie z rozmiarem Fr.
- Oznaczenie długości w cm wzdłuż zgłębnika
- Objętość balonu oznaczona na trzonie zgłębnika
- Dodatkowe akcesoria dołączane do każdego zgłębnika: opakowanie lubrykantu ułatwiającego zakładanie oraz strzykawka Ballon danumed® 10ml luer do napełniania balonika retencyjnego



BEZPIECZEŃSTWO

- Rurka zgłębnika do żywienia zastępczego wykonana z wysokiej jakości silikonu klasy medycznej
- Nie zawiera: LATEKSU, PVC, FTALANÓW (DEHP), BISFENOLU A (BPA)
- Płaska, zaokrąglona końcówka umożliwia atraumatyczne wprowadzanie
- Zagłębione ujście balonu zapobiega urazom
- Wewnętrzny balon retencyjny charakteryzuje się wysoką stabilnością dla długiego użytkowania, bezpiecznego mocowania i uniknięcia wycieków
- Złącza ENFit® zgodne z normą EN ISO 80369-3 zapobiegają błędnym połączeniom przewodów z innymi systemami
- Dostępne z połączeniami ENFit® i Y-ENFit®
- Widoczny w promieniach RTG pasek wzdłuż całego trzonu

Łatwa obsługa i bezpieczne, dyskretne mocowanie zgłębnika za pomocą płytki danuPlate 90°:

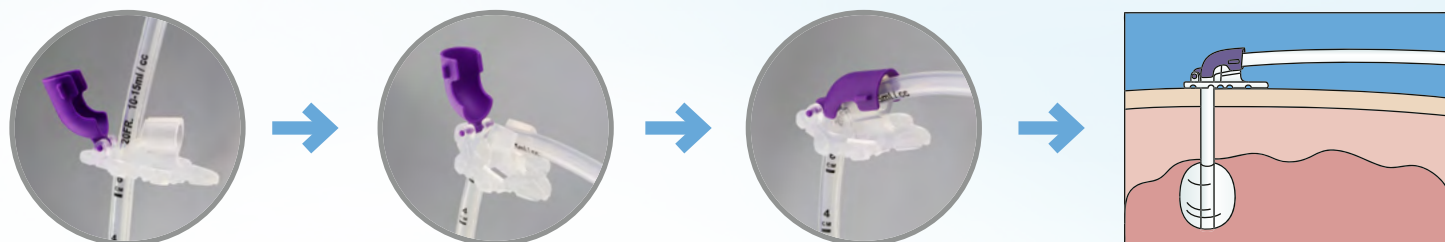

Zgłębnik danumed® GastroTube dostępny jest ze złączem ENFit® oraz Y-ENFit®
Dostarczany w zestawie z lubrykantem i strzykawką Ballon danumed® 10 ml luer.



Kod produktu	Opis produktu	Rozmiar w skali Fr	Sztuk/opakowanie	Nie zawiera LATEKSU	Nie zawiera PVC	Nie zawiera DEHP	Nie zawiera BPA
DA 1044 0112	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	12	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0114	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	14	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0116	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	16	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0118	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	18	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0120	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	20	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0122	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	22	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0124	danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®	24	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0212	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	12	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0214	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	14	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0216	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	16	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0218	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	18	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0220	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	20	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0222	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	22	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0224	danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel®	24	1 sztuka	•	•	•	•
DA 1044 0700	zacisk danuClip	--	15 sztuk	•	•	•	•

Każdy zgłębnik danumed® GastroTube jest pakowany pojedynczo, sterylnie. Zgłębnik danumed® GastroTube jest pakowany w sterylnym opakowaniu typu peel-pouch. Każdy zgłębnik zapakowany jest w osobnym pudełku wraz z lubrykantem i sterylną strzykawką Ballon danumed® 10 ml luer. 10 sztuk w kartonie zbiorczym.

Produkty powiązane z danumed® GastroTubes:



Strzykawki enteralne danumed®, jednorazowe i dla jednego pacjenta



zestawy danumed® do żywienia metodą grawitacyjną (Gravity Spike, Gravity Universal) oraz worek danumed® do żywienia metodą grawitacyjną (Gravity FeedBag)



Dystrybutor na terenie Polski:

MADMED Sp. z o.o.

Tel. +48 698 132 870

biuro@madmed.eu | www.madmed.eu

danumed Medizintechnik GmbH –
Indywidualne rozwiązania są
naszym standardem.



danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany

Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com